

WINBACK

ESTÈL
MILANO



BIOBACK
Luminosità naturale



TECNOLOGIA AVANZATA PER RISULTATI ECCEZIONALI

Il segreto del successo di WINBACK deriva dalle sue innovazioni tecniche al servizio di terapisti e professionisti della salute, che mirano a sviluppare trattamenti migliori per risultati rapidi ed efficaci.

WINBACK ha creato un nuovo dispositivo dedicato all'estetica: BIOBACK. Questo dispositivo a radiofrequenza, basato su tecnologia TECAR multi-punto, consente trattamenti rivoluzionari, per le persone desiderose di recuperare la giovinezza del viso e del corpo.

I BENEFICI DI BIOBACK

- › Luminosità della pelle
- › Rassoda la pelle
- › Rughe e linee d'espressione
- › Cellulite fibrosa
- › Smagliature
- › Cicatrici e fibrosi
- › Sindrome miofasciale
- › Trigger points

Anche con uno stile di vita sano, l'aspetto, la compattezza e il tono della cute si deteriorano gradualmente. Esposizione al sole, cambiamenti ormonali, gravidanza e dimagrimento, sono tutti fattori che influiscono sull'elasticità delle fibre di collagene della pelle.

Le zone del corpo dove la pelle si rilassa più facilmente sono: ovale del viso, guance, collo e décolleté, mani, fianchi, interno braccia, interno cosce e pancia. È quindi su queste aree che BIOBACK si concentra e agisce, per ottenere un miglioramento rapido e visibile.







TRATTAMENTI VISO

- › Drenaggio e ripristino della luminosità
- › Riduzione rughe e imperfezioni
- › Rassodamento pelle
- › Tonificazione pelle
- › Riduzione della ritenzione idrica
- › Rimodellamento del contorno viso



TRATTAMENTI CORPO

- › Rassodamento della pelle
- › Rimodellamento dei contorni
- › Riduzione della ritenzione idrica
- › Tonificazione della pelle
- › Riduzione dell'aspetto fibroso della cellulite





LA COMBINAZIONE TECAR E PULSE AL SERVIZIO DELLA BELLEZZA

Create in sinergia con i professionisti, le innovazioni di WINBACK offrono una risposta efficace, rapida e duratura a sfide considerate molto difficili da risolvere (cellulite fibrosa, adiposità localizzate, apoptosi addominale).

BIOBACK è un'innovazione tecnologica basata sulla TECAR pulsata (Transfer of Energy Capacitive and Resistive).

Grazie al suo elettrodo *all-in-one*, BIOBACK permette di diffondere queste due correnti. L'energia TECAR è suddivisa in più punti di riscaldamento per un'azione localizzata che penetra più in profondità. PULSE genera analgesia attraverso la saturazione dei nocicettori. Ciò consente un trattamento efficiente e più confortevole, sia per il paziente che per il medico. Il funzionamento intuitivo e la sicurezza di BIOBACK aprono prospettive senza pari nel campo delle applicazioni per la bellezza.

UN DUO ELETTRICO

Il principio è quello di combinare una corrente a bassa frequenza, che eliminerà le tensioni sottocutanee, e una corrente ad alta frequenza, per rigenerare gli strati profondi dell'ipoderma.

Completamente non invasiva e indolore, questa combinazione di correnti garantisce uno spettacolare effetto lifting profondo, per il ringiovanimento della pelle del viso e del corpo. Fornisce una risposta stimolante che consente agli strati profondi della pelle di rigenerarsi in modo completamente naturale e sicuro.





EFFETTI CLINICI DELLA TERAPIA BIOBACK

- › Produzione di collagene
- › Guarigione/rigenerazione
- › Angiogenesi/neovascolarizzazione



PULSE : *PREPARAZIONE ALLA BASSA FREQUENZA*

La nostra pelle è soggetta agli effetti quotidiani dello stress, che contribuiscono al suo invecchiamento.

Lo stress, infatti, provoca un aumento della tensione muscolare e una perdita di elasticità della fascia. La corrente pulsata permette di agire direttamente su questi effetti negativi, allentando le tensioni



dei muscoli e della fascia. Il trattamento ripristina il tono muscolare, migliorando la microcircolazione cutanea. L'unione della corrente pulsata con un massaggio a pressione, stimola il drenaggio linfatico, il cui obiettivo è pompare i liquidi stagnanti, responsabili di gonfiori o di colorito ceroso. La pelle ritrova la sua vitalità e

sarà pronta per la fase di rigenerazione indotta dalla corrente ad alta frequenza.



TECAR :
*RIGENERAZIONE AD
ALTA FREQUENZA*

Quando viene applicata sulla pelle, la corrente ad alta frequenza genera calore nel tessuto sottocutaneo (processo noto come diatermia).

Questo innesca una retrazione delle fibre di collagene e la produzione di nuovo composto collagene. Il trattamento rassoda la pelle, elimina linee d'espressione



e rughe, combatte gli inestetismi del viso (l'ovale del viso) e del corpo (braccia, interno cosce, pancia, mani), rallentando l'invecchiamento cutaneo.

Risultato: la pelle è più liscia – senza dolore né rischi – attraverso un processo naturale e duraturo. Gli effetti sono visibili fin dal primo trattamento. Poche sedute saranno

sufficienti per raggiungere risultati a lungo termine e ottenere i cambiamenti desiderati. La pelle trattata apparirà più giovane e tonica, grazie al restringimento dei pori cutanei.

Tutti i tipi di pelle possono trarne beneficio, compresi quelli più sensibili all'acne e all'invecchiamento.





I VANTAGGI DEL MICRONEEDLING...

SENZA INCONVENIENTI

Con Bioback puoi beneficiare degli effetti del microneedling (miglioramento della luminosità del viso, della struttura della pelle e dell'aspetto delle smagliature, oltre alla riduzione delle rughe) utilizzando un metodo non invasivo.


Tutto questo, evitando ogni disagio che potrebbe verificarsi con il microneedling, come dolori sgradevoli, arrossamenti o addirittura emorragie.

L'ELETTRODO FOCUS: UN'INNOVAZIONE WINBACK



L'elettrodo permette di applicare le due correnti attraverso 86 micro-punti di emissione, oltrepassando la barriera cutanea e agendo direttamente sul derma. Durante il trattamento, questo elettrodo induce il rilassamento, seguito dalla stimolazione dei muscoli sottostanti, e il rinnovamento del collagene, mediante l'invio di corrente attraverso microscopici punti elettrici. L'applicatore eroga impulsi elettrici su 86 micro-punti che attraversano la barriera dell'epidermide e agiscono direttamente sul derma, stimolando il rinnovamento del collagene e, a un livello più profondo, riducendo le cellule adipose (ad esempio, nelle fossette, nel doppio mento e nella zona periorbitale).

Le molteplici impostazioni di Bioback consentono di combinare i benefici di queste due correnti, regolando l'intensità, la durata o la profondità di penetrazione.

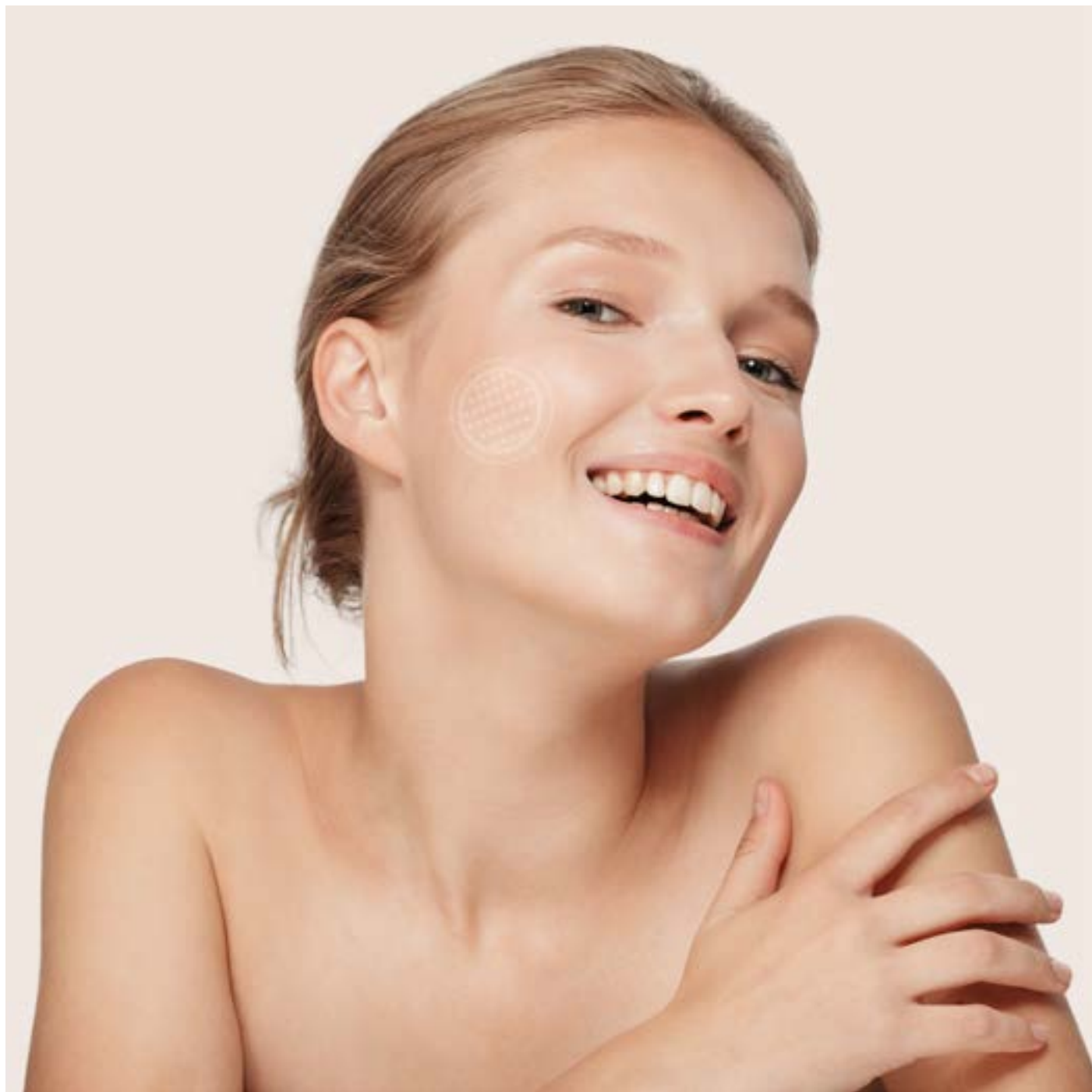


BIOBACK SI ADATTA ALLA PROFONDITÀ

ELETTRODO MULTIPOLAR: EPIDERMIDE E DERMA SUPERFICIALE

L'elettrodo MULTIPOLAR è un applicatore mobile con tre poli dinamici, che commutano successivamente tra emissione e ricezione di corrente. Due poli su tre sono attivi contemporaneamente.

**Ideale per cicatrici cutanee/
sottocutanee/fascia**

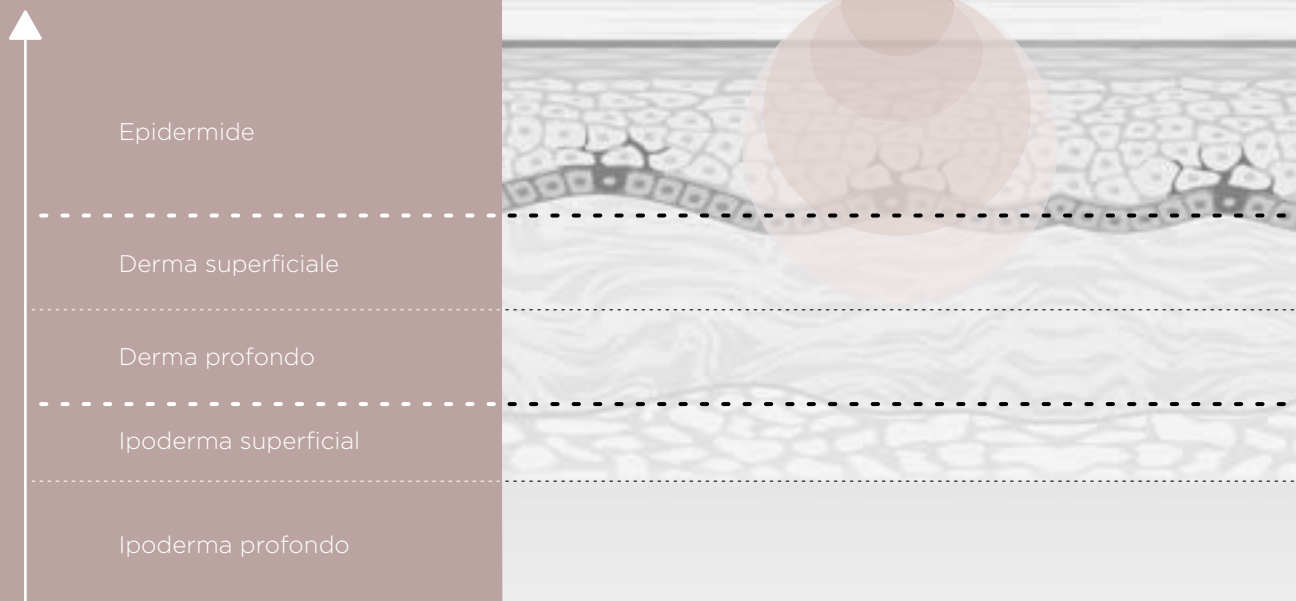

ELETTRODO FOCUS: DALL'EPIDERMIDE ALL'IPODERMA PROFONDO

L'elettrodo FOCUS è un applicatore a radiofrequenza frazionata, che eroga una scarica di energia TECAR e PULSE, attraverso una moltitudine di piccoli elettrodi.


Ideale per tessuti resistenti/intraossei a livello dell'ipoderma superficiale e profondo, o nel percorso tra l'accessorio e l'elettrodo di ritorno



BRACCIALI: DERMA SUPERFICIALE E PROFONDO

I bracciali WINBACK permettono alla corrente di passare attraverso la mano del terapeuta per ridurre le rughe e rassodare la pelle, stimolando la sintesi del collagene in modo naturale, non invasivo e molto piacevole.

Ideale per trattamento manuale

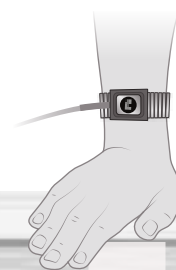

LUMINOSITÀ IN 20 MINUTI

BIOBACK ti permette di ridare splendore al viso dei tuoi pazienti in soli 20 minuti. Con l'aiuto di questi tre accessori è possibile attivare e stimolare le fibre di collagene, tonificare i muscoli sottostanti e concludere dolcemente con un massaggio rilassante. Otterrai un effetto immediatamente visibile!





SVOLGIMENTO DI UNA SESSIONE DI BIOBACK IN 3 FASI

01

ATTIVAZIONE

La diatermia è la reazione dei tessuti al passaggio della corrente, che crea calore interno. A temperature superiori a 40 ° C si osserva una riorganizzazione delle fibre di collagene, la cui immediata conseguenza è un effetto tensore e un visibile rassodamento della pelle. I fibroblasti sono stimolati, il metabolismo cellulare viene regolato, la produzione di nuovo collagene si attiva.

L'obiettivo è quindi quello di raggiungere la soglia di temperatura di 40°C.

02


STIMOLAZIONE

L'obiettivo è quello di creare ipertermia nell'ipoderma, in modo molto localizzato, al fine di stimolare la neocollagenesi profonda. L'elettrodo di ritorno mobile deve essere il più vicino possibile all'applicatore FOCUS, senza toccarlo. Inquadrando i muscoli cutanei tra l'elettrodo FOCUS e l'elettrodo di ritorno mobile, la corrente PULSE rafforza l'effetto di tensione della radiofrequenza frazionata.

03

TONIFICAZIONE

L'obiettivo di questa fase è di introdurre un'azione meccanica modellante, eseguendo un massaggio che si adatti alla zona e alle esigenze del trattamento.

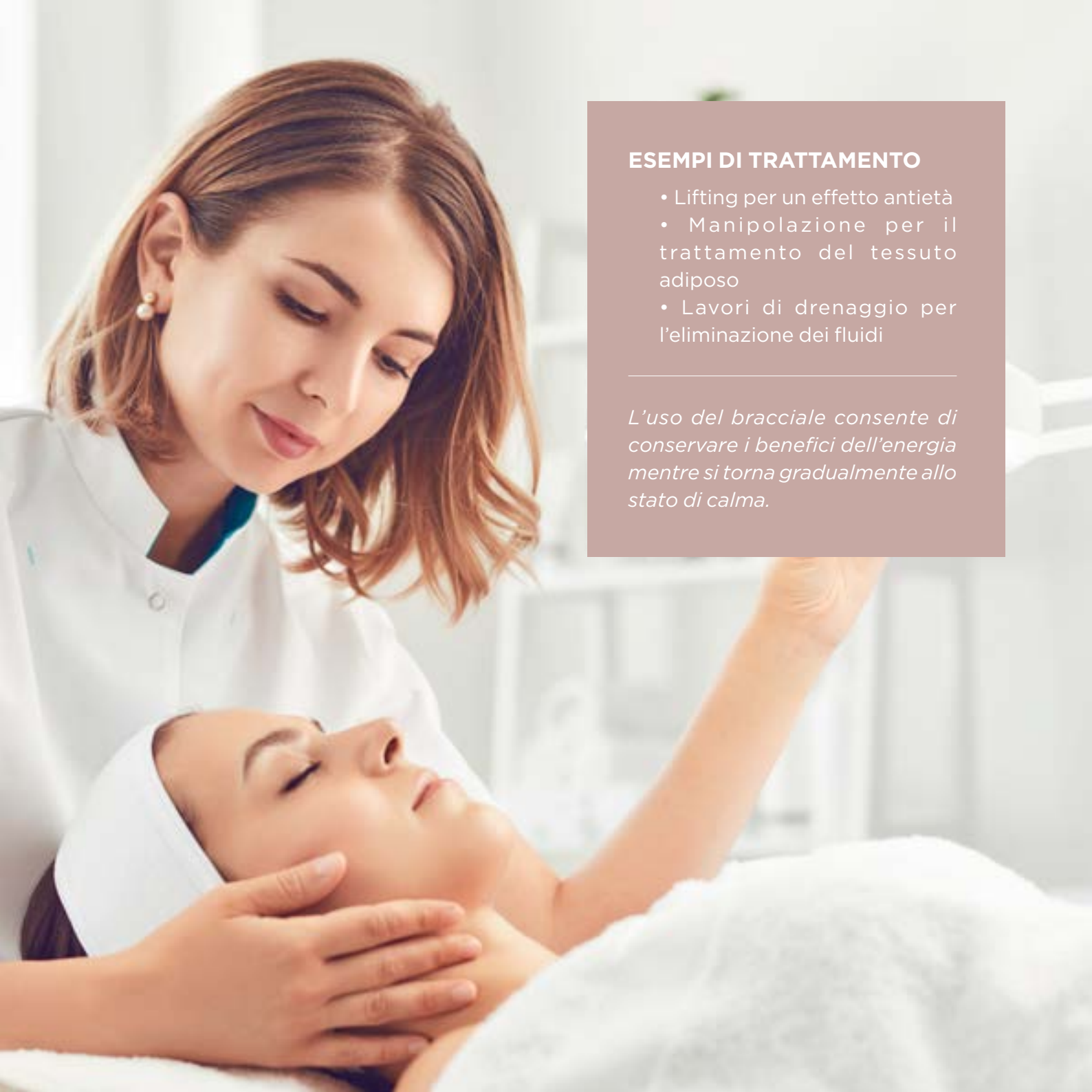


ESEMPI DI TRATTAMENTO

- Lifting per un effetto antietà
- Manipolazione per il trattamento del tessuto adiposo
- Lavori di drenaggio per l'eliminazione dei fluidi

L'uso del bracciale consente di conservare i benefici dell'energia mentre si torna gradualmente allo stato di calma.

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

Potenza in ingresso	100-240 Vac - 50/60Hz
Consumo massimo	90VA
Wifi	Banda di frequenza: 2400-2483,5MHz Potenza massima: fino a 20 Mbps
Dimensioni	222x205x80mm
Peso	1,2kg
Condizioni d'uso	Temperatura -10°C-40°C Umidità 20-90% Pressione 800-1060hPa
Condizioni di trasporto e immagazzinamento	Temperatura -20°C-70°C Umidità 10-95% Pressione 800-1060hPa
Accessori	<ul style="list-style-type: none">• 1 elettrodo FOCUS• 1 elettrodo MULTIPOLAR Face• 1 elettrodo RET 40• 1 manipolo TECAR mobile• 1 manipolo mobile neutro• 1 braccialetto• 1 Fixpad neutro• 1 cavo RET• 1 cavo neutro• 1 cavo adesivo neutro• Piastre adesive• 1 vasetto di crema conduttiva Winback (500 mL)

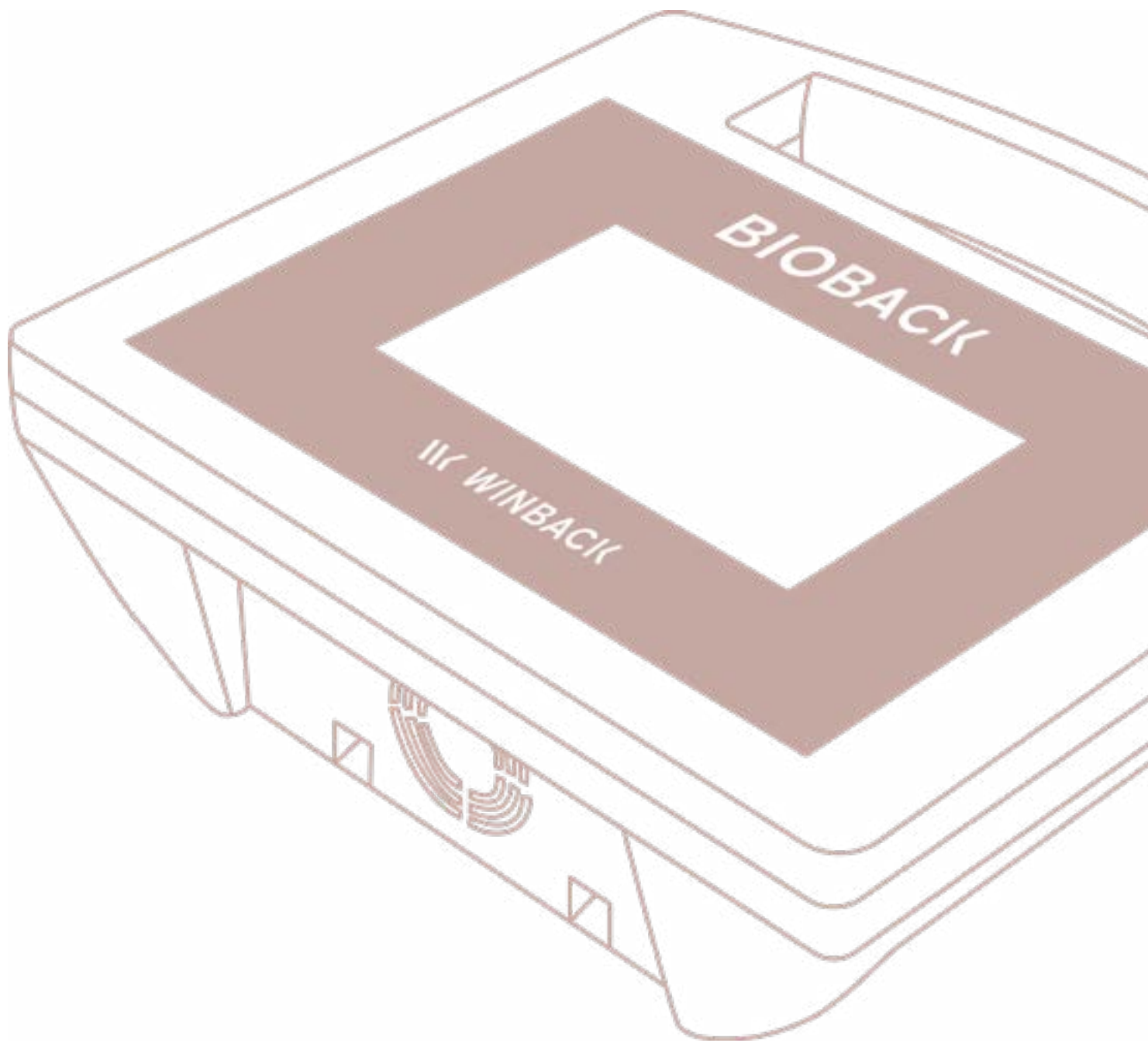



WINBACK
Les Bureaux du Parc - 2474 RD 6007
06270 Villeneuve-Loubet - FRANCIA

T. +33 (0)4 83 66 16 66
hello@winback.com

www.winback.com